

LOKALE VIBRATIONSTHERAPIE ZUR  
BEHANDLUNG VON TIEREN





1

## BEWÄHRTE WIRKWEISE

Schmerzreduktion und verbesserte Bewegungsabläufe durch NOVAFON

Die sanften Vibrationen des NOVAFON tragen dazu bei, Schmerzen zu reduzieren sowie die Symptome neurologischer Erkrankungen zu lindern.



Lebensqualität erhöhen



Durchlässigkeit und Mobilität erhalten



Sehnenschmerzen reduzieren



Bewegungsabläufe verbessern



Muskelschmerzen lindern



Arthroseschmerzen lindern



Gelenkschmerzen lindern



Geistige und körperliche Entspannung fördern



Beziehung verbessern



Muskulatur vorbereiten und regenerieren (im Sportbereich)

2

## DIE VORTEILE DER NOVAFON BEHANDLUNG

Sanft und dennoch tiefenwirksam — von Kopf bis Fuß für Pferde und Kleintiere



### SENKRECHTE STIMULATION

Durch die senkrechte Stimulation entfaltet sich die Wirkung tief im Gewebe. So erreichen die Vibrationen auch tief liegende Behandlungsareale.



### SANFTE BEHANDLUNG

Die sanfte Technologie des NOVAFON ermöglicht ein breites Behandlungsspektrum von Kopf bis Fuß. So lassen sich auch empfindliche Körperstellen angenehm behandeln.



### 6 CM + TIEFENWIRKUNG

NOVAFON Geräte haben eine Tiefenwirkung von 6 cm +, während andere Therapiegeräte oft nur oberflächlich stimulieren.



Entdecken Sie unseren smartesten Neuzugang in der NOVAFON Family: DAS NOVAFON power 2. Es erwartet Sie ein noch nie dagewesenes Intensitätsspektrum sowie 3 Frequenzstufen, welche die NOVAFON Anwendungen noch individueller machen.

3

## SAY HI! TO THE FUTURE OF RECOVERY DAS NOVAFON power 2



4

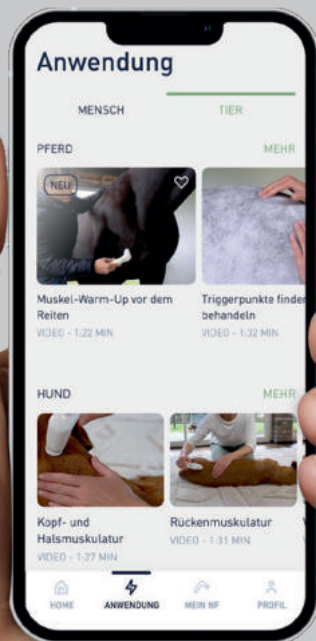
## ENTDECKEN SIE DIE NOVAFON APP

### Einfach richtig behandeln: Der NOVAFON Behandlungs-Guide

#### DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUM NOVAFON SCHALLWELLENGERÄT

Der NOVAFON Behandlungs-Guide bietet Ihnen die Möglichkeit, das Gerät besser kennenzulernen, die richtige Anwendung für das Tier und sich zu finden, zu verstehen und durchzuführen.

Zudem unterstützt Sie die App dabei, die NOVAFON Anwendung noch besser in Ihren Alltag zu integrieren.



- Erhalten Sie nützliche Infos zu Gerät und Wirkweise
- Erfahren Sie Wissenswertes zu Körperbereichen und Hintergründen
- Lassen Sie sich Schritt für Schritt durch die Anwendungen führen

QR Code scannen & kostenfrei App downloaden




5

## DIE ZUKUNFT IST SMART
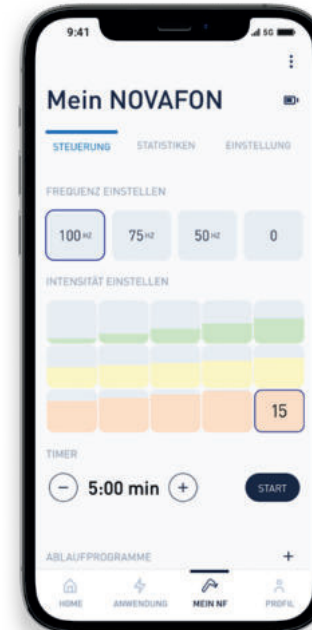
### Praktische Bluetooth-Konnektivität

Die direkte Bluetooth-Verbindung zwischen dem NOVAFON power 2 und der kostenlosen NOVAFON App ermöglicht Ihnen noch größere sowie personalisierbare Einstellungsmöglichkeiten. Tauchen Sie ein in die smarte Zukunft der lokalen Vibrationstherapie.



#### REGULIERBARE INTENSITÄTSSTUFEN

Das große Intensitätsspektrum mit 3 Frequenzen und 15 Intensitätsstufen bietet die bisher vielfältigsten Einstellungsmöglichkeiten individuell anpassbar für alle tierischen Patienten.

#### PERSONALISIERBARE BEHANDLUNG

Einstellungen für Katze, Hund oder Pferd auf Knopfdruck: Für die effektivste Anwendung können Sie individuelle Behandlungsabläufe konfigurieren. Diese können Sie für die wiederholte Nutzung in der Praxis und Eigenanwendung speichern. So wird DAS NOVAFON power 2 für Sie zum Allrounder für alle Einsätze.

#### WERDEN SIE KREATIV

Machen Sie DAS NOVAFON power 2 zur Ihrem ganz persönlichen Alltagsbegleiter und lassen Sie sich oder Ihr Tier begrüßen. Wählen Sie Ihre Lieblings-Displayfarbe.





## BEWÄHRTE TECHNOLOGIE

Schon viele Jahre erfolgreich im Einsatz bei Tiertherapeuten, Tierbesitzern und Profisportlern

»Bei jedem Pferd, das ich in der Testphase mit dem NOVAFON behandelt habe, war eine eklatante Lockerung der therapierten Muskulatur sowie eine deutliche Erwärmung der behandelten Areale zu spüren.«

Tiertherapeutin K.<sup>1,4</sup>



»Besonders Hunde mit einer schwachen Muskulatur der Hinterhand zeigen eine deutliche Verspannung der Muskulatur im LWB. Umgekehrt können dauerhafte Schmerzen in diesem Bereich auch zu einem gestörten Funktionsablauf in der Bewegung führen bis hin zu Verletzungen. So hat das NOVAFON bei uns mittlerweile einen festen Platz in der Vorbereitung und Aufwärmung vor dem Bewegungstraining gefunden.«

Tierheilpraktikerin M. für Physiotherapie und Naturheilkunde<sup>2,4</sup>

»Wir sind absolut begeistert von Nova fon. Ich benutze es sowohl für unsere Ponys, den Hund und auch für uns. Wir alle lieben es heiß und innig! Der Kundenservice und die Beratung sind auch super und man hat immer ein offenes Ohr für unsere Probleme. Auch als Laie wurde mir verständlich erklärt, wie ich das NOVAFON an meinen einzelnen Patienten anwende.«

Anwenderin B.<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup> Homepage, Erfahrungsbericht von Hands 4 Horses: [novafon.com/media/pdf/8f/ee/a8/Erfahrungsbericht\\_Pferd\\_Hufe\\_Muskelrelaxion\\_Hands4Horses.pdf](https://novafon.com/media/pdf/8f/ee/a8/Erfahrungsbericht_Pferd_Hufe_Muskelrelaxion_Hands4Horses.pdf). <sup>2</sup> Instagram, Therapeutenbericht von TierheilPraxis. <sup>3</sup> Google Rezension einer Anwenderin <sup>4</sup> Einzelfallbeobachtung: Es liegen u. U. nicht ausreichend klinische Daten vor, um eine generelle Eignung der Lokalen Vibrationstherapie bei der beschriebenen Symptomatik zu belegen. Es handelt sich um Anwenderzitate.



» Mit dem NOVAFON ist eine sehr gezielte und individuelle Anwendung möglich. Dies kommt uns zugute, da wir so jedes Pferd im Stall nach seinen Bedürfnissen behandeln können. Besonders SAP Hale Bob OLD genießt die regelmäßige Behandlung im Bereich Rücken und Hals.«

*Ingrid Klimke*

Olympiasiegerin und NOVAFON Markenbotschafterin  
Ingrid Klimke



Entdecken Sie noch viele weitere Erfahrungsberichte auf Instagram @novafon\_vet



## LOKALE VIBRATIONSTHERAPIE

Bewährte Wirkweise, vielfältige Einsatzmöglichkeiten

### DREI FREQUENZEINSTELLUNGEN

Mit insgesamt drei verschiedenen Frequenzen - 100, 75 und 50 Hz ermöglicht NOVAFON die systematische Behandlung jeder einzelnen Körperregion.

### 100 Hz

#### LINDERUNG VON MUSKELSCHMERZEN

Wenn der sensorische Reiz der Vibration auf die Nervenfasern trifft, kann die Weiterleitung von Schmerzsignalen an das Gehirn unterbrochen werden, da der sensorische Reiz den Schmerzreiz überlagert. Dieser unter „Gate Control Theorie“ bekannte Effekt kann bei regelmäßiger Anwendung auch längere Zeit nach der Behandlung anhalten.

So lassen sich Schmerzen — ganz ohne Medikamente — lindern.

### 50 Hz

#### LÖSEN VON VERSPANNUNGEN

Über die tiefenwirksamen Vibrationen werden Muskelverspannungen gelöst und verhärtetes Gewebe gelockert – und das von Kopf bis Fuß: Von der Kiefermuskulatur bis zur Hinterhand.

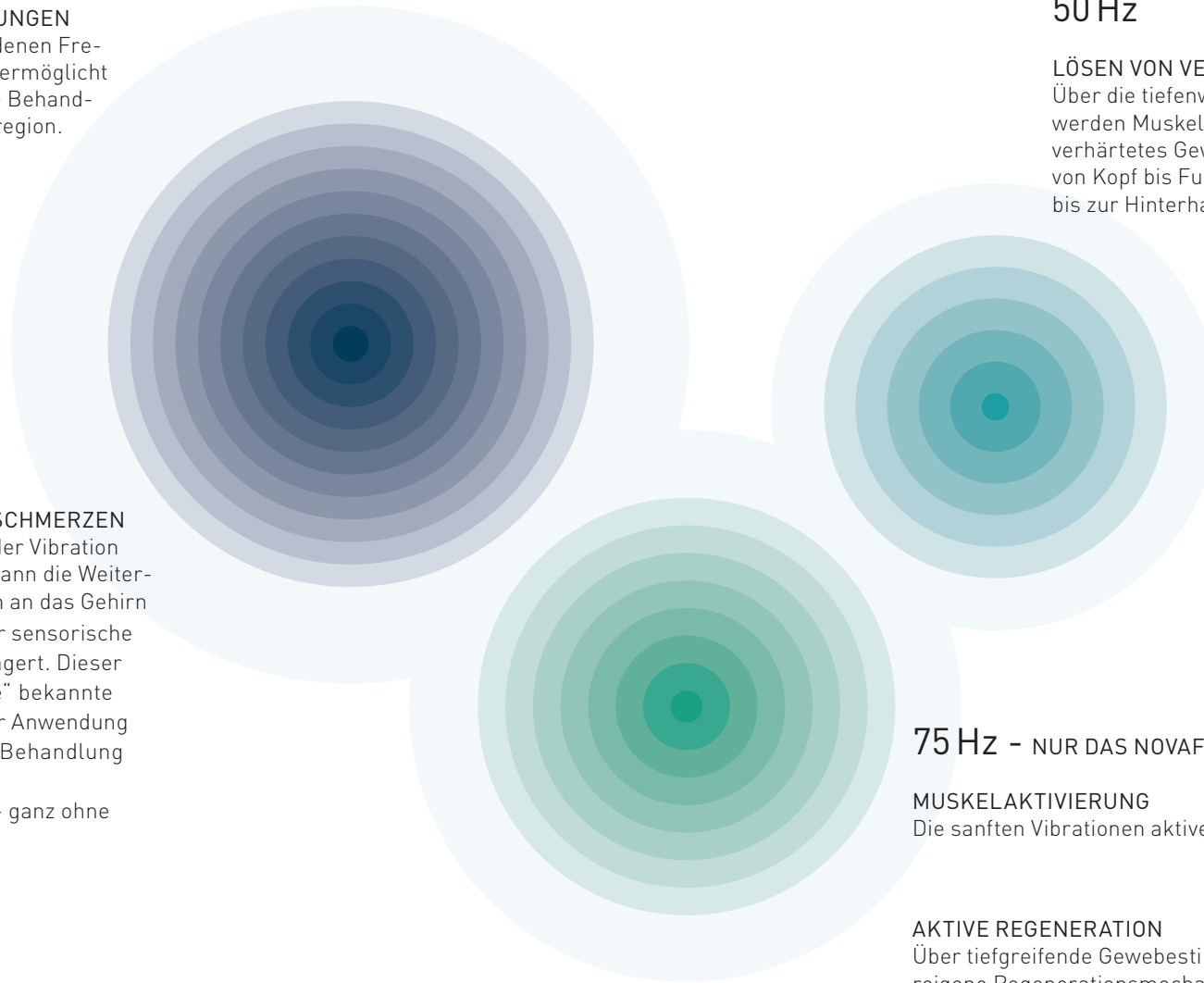
### 75 Hz - NUR DAS NOVAFON POWER 2

#### MUSKELAKTIVIERUNG

Die sanften Vibrationen aktivieren die Muskulatur.

#### AKTIVE REGENERATION

Über tiefgreifende Gewebestimulationen werden körpereigene Regenerationsmechanismen angeregt. Die Muskulatur kann sich schneller erholen und die körperliche Leistungsfähigkeit wird gesteigert. Die Durchblutung wird angeregt und die Muskulatur besser mit Stoffwechselprodukten wie Sauerstoff versorgt.



## GERÄTEVERGLEICH

## Welches NOVAFON passt zu mir?



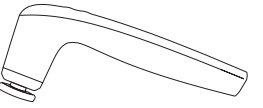

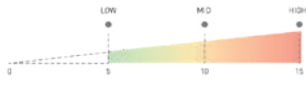
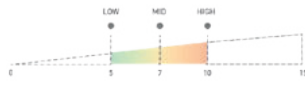
In unserem Gerätevergleich können Sie herausfinden, welches NOVAFON am besten auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Mit dem NOVAFON power 2 können Sie durch die Wahlmöglichkeiten zwischen 3 Frequenzen mit jeweils 15 Intensitätsstufen alle Körperregionen und Behandlungen abdecken.

Wenn Sie vorrangig sanftere Behandlungen an empfindlichen Körperstellen vornehmen, empfehlen wir DAS NOVAFON.

Für die vorrangige Behandlung großer und kompakter Muskelgruppen, z. B. bei Sportlern, kann DAS NOVAFON power auf Grund der höheren Intensitäten bei Stufe 2 und 3 die bessere Wahl sein.

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch und ganz individuell. So finden Sie das NOVAFON, das speziell für Ihren Anwendungsbe- reich geeignet ist.

	DAS NOVAFON POWER 2	DAS NOVAFON POWER	DAS NOVAFON
			
ANWENDERGRUPPEN	Selbst- & Fachanwender Für Mensch & Tier – alle Körperbereiche	Selbst- & Fachanwender Für Mensch & Tier – alle Körperbereiche	Selbst- & Fachanwender Für Mensch & Tier – v.a. sensible Körperbereiche
INTENSITÄTSSTUFEN			
EINSATZGEBIETE	Schmerzen, Verspannungen, Sportverletzungen, Narben, CMD, Gelenkschmerz/ Arthrosen, logopädischen & neurologischen Krankheits- bildern und zur Regeneration	Schmerzen, Verspannungen, Sportverletzungen, Narben, logopädischen & neurologi- schen Krankheitsbildern und zur Regeneration	Schmerzen, leichten Verspannungen, Sportver- letzungen, Narben, CMD, Gelenkschmerz/Arthrosen, logopädischen & neurologi- schen Krankheitsbildern
PRODUKTMERKMALE*			
Frequenzen	100 Hz   75 Hz   50 Hz	100 Hz   50 Hz	100 Hz   50 Hz
Amplitude	0,3 – 4 mm	0,5 – 4 mm	0,3 – 3,5 mm
Wasserresistenz	IP44 – Spritzwassergeschützt	IP22 – Tropfwassergeschützt	IP22 – Tropfwassergeschützt
Abmessungen	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)
App-Konnektivität	2,4 GHz	-	-
App	Einstellungen & Display personalisieren	-	-
	Behandlungsverlauf verfolgen	Behandlungsvideos über App möglich	Behandlungsvideos über App möglich
	Voreinstellungen optimieren	-	-

\*Detaillierte technische Daten finden Sie in den Produktdatenblättern im Downloadbereich unserer Webseite [www.novafon.de/downloads](http://www.novafon.de/downloads)




14

## EINFACHER AUFSATZWECHSEL

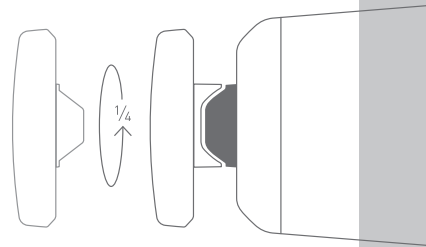Intelligentes Stecksystem zum Anbringen der Aufsätze

Durch eine Vierteldrehung ist jeder Aufsatz ohne Kraftaufwand leicht anzubringen oder zu lösen.



**Telleraufsatz**  
zur flächigen Anwendung und zum Ausstreichen



**Kugelaufsatz**  
kleinflächigere und punktuelle Behandlungen

Teller- und Kugelaufsatz, sowie ein Ladekabel mit Netzstecker sind Teil des Lieferumfangs beim Kauf eines NOVAFON Gerätes.



15

## WEITERE AUFSÄTZE

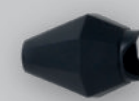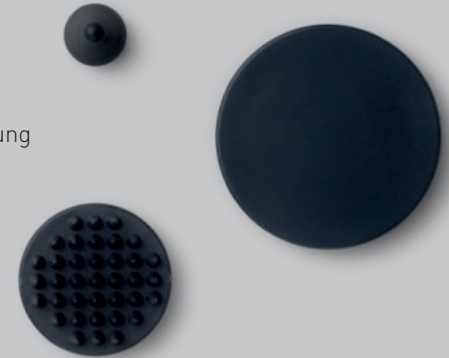Optimieren Sie Ihre Behandlung mit diesen Aufsätzen\*

### Reha-Set

**Telleraufsatz XL** ideal zur Behandlung von größeren Muskelgruppen  
**Igelauufsatz** besonders stimulierend  
**Kegelaufsatz** für punktuelle und präzise Anwendungen




### Magnetauufsatz

punktuelle und intensivierte Anwendung beispielsweise bei der Behandlung von Triggerpunkten oder tief liegenden Behandlungsarealen

### Sensi-Roller

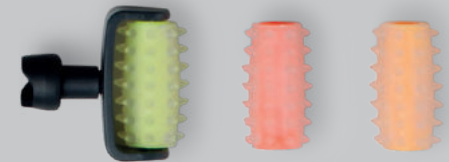kombiniert die durchblutungsfördernde Igelballmassage mit den Vibrationen des NOVAFON Schallwellengeräts und stimuliert so die Oberflächen- und Tiefensensibilität



### Physio-Set

**Faszien-Ball** Behandlung auch an konkaven Körperflächen  
**Faszien-Gabel** sorgt für punktuellen Druck, zum Beispiel seitlich der Wirbelsäule  
**Faszien-Keil** Ausstreichen größerer Muskelstränge und tief liegendem Faszienewebe

\*Alle Aufsätze sind erhältlich in Schwarz, Anthrazitgrau und Weiß.

## MODULAR-SET

Das erste Aufsatzset, das speziell für den Einsatz am Tierkörper entwickelt wurde

Triggermodul effektive bilaterale Stimulation, z. B. an Zwischenrippenmuskeln.

Gripmodul eignet sich zur Faszien-Therapie und setzt sensorischen Input auf der Haut.



Oval-Aufsatz ist ideal zur flächigen Behandlung am Tierkörper.

Noppenmodul ist besonders stimulierend und gleitet sanft durch Fell.



Das neue 4-in-1-Modular-Set mit den unterschiedlichen Oberflächenprofilen vereint zwei wirksame Behandlungsprinzipien: **Durchblutungsförderung** durch die Aufsatzoberflächen sowie **Schmerzlinderung und Muskelstimulation** durch die NOVAFON-Vibrationen. Das smarte Klicksystem sorgt für einen einfachen Wechsel der Module während der Behandlung. Nach dem Gebrauch lassen sich die Aufsatzmodule unter fließendem Wasser und mit Seife reinigen.

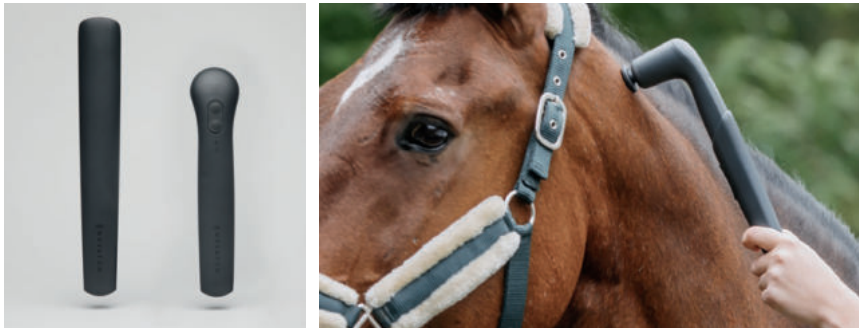
Das Modular-Set kommt exklusiv im praktischen Transport-Case mit Gürteltasche – perfekt für mobile Einsätze, den Pferdestall und auf Reisen.



18

## ZUBEHÖR

Für das beste NOVAFON Erlebnis



Mit dem praktischen Verlängerungsgriff arbeiten Sie einfach auch an großen Tieren, ohne einen Hocker zu benötigen. Vorab den Verlängerungsgriff auf das NOVAFON Gerät stecken, verriegeln und die Behandlung wie gewohnt durchführen.



Damit Sie lange Freude an Ihren NOVAFON Produkten haben, bieten wir Ihnen die beste Möglichkeit, sie schonend und dennoch hygienisch richtig zu reinigen: NOVACLEANER. Ganz ohne Alkohol, für Medizinprodukte entwickelt, natürlich dermatologisch getestet und besonders hautfreundlich. Einzeln, oder als Set mit unserem weichen Mikrofaser Tuch erhältlich.



Alle Zubehöre sind erhältlich in Schwarz, Anthrazitgrau und Weiß.

19

## PRAKTISCHE LADESTATION

Vereinfachtes Laden und professionelle Präsentation



Die Ladestation ergänzt das NOVAFON Gerät perfekt: Ihre herausragenden Eigenschaften sind bequemer Laden durch einen stabilen Stand und eine vereinfachte Ablage des Geräts.







## SICHER TRANSPORTIEREN

Geschützte Aufbewahrung und praktische Tastensperre



### IMMER MIT DABEI

Dieses platzsparende Case wurde speziell zur Aufbewahrung eines einzelnen NOVAFON Geräts einschließlich Netzteil/Kabel oder Lieblingsaufsätzen konzipiert. Individuelles Zubehör kann darüber hinaus bequem in der im Deckel befindlichen Netztasche verstaut werden.

### PRAKTISCHE TASTENSPERRE

Bei mobilen Einsätze, im Pferdestall oder auf Reisen – exklusiv für DAS NOVAFON power 2 entwickelt, können Sie mit der praktischen Tastensperre „Travel Lock“ Ihr Gerät vor einer ungewollten Inbetriebnahme schützen.



## FÜR TIERTHERAPEUTEN UND TIERBESITZER

Die Lokale Vibrationstherapie für  
Pferde, Hunde und Katzen

Die seit vielen Jahrzehnten beim Menschen bewährte NOVAFON Therapie wird ebenso erfolgreich bei Pferden, Hunden und anderen Tieren mit orthopädischen oder neurologischen Erkrankungen eingesetzt. Durch gezielte lokale Vibrationen werden Muskeln, Gewebe und Nerven tiefgreifend stimuliert.

Tiere empfinden diese sanfte Therapieform als sehr angenehm und viele Tiertherapeuten berichten neben den physiologischen Verbesserungen auch von einer psychischen Entspannung der Tiere.

NOVAFON ist erwiesenermaßen wirksam und einfach anzuwenden.

## EINSATZBEREICHE

Schmerzlinderung und Regeneration  
bei diversen Krankheitsbildern

### PFERD

#### Kopf-, Nacken- und Halsmuskulatur

Kiefergelenk-Symptomatik,  
Nackenband-Symptomatik,  
Myofasziale Schmerzen

#### Schultermuskulatur

Myofasziale Schmerzen

#### Rückenmuskulatur

Kissing Spines,  
Empfindlichkeit in der  
Sattellage,  
Myofasziale Schmerzen

#### Kreuzdarmbeingelenk

ISG-Symptomatik

#### Hinterhand

Knie-Symptomatik,  
Myofasziale Schmerzen

#### Extremitäten/Beine

Sehnenerkrankung,  
Gelenk-Symptomatik

#### Rittigkeit und Losgelassenheit

Erhaltung der Mobilität und  
Unterstützung der Warm-Up  
und Cool-Down Phasen

### HUND

#### Kopf- und Halsmuskulatur

Myofasziale Schmerzen

#### Wirbelsäule und Rückenmuskulatur

Myofasziale Schmerzen,  
Spondylose/Spondylarthrose,  
Bandscheibenvorfall,  
DLSS – degenerative  
lumbosakrale Stenose

#### Extremitäten

Ellbogendysplasie ED,  
Hüftdysplasie HD,  
Arthrosen der Gelenke

#### Lebensqualität

Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und der Entspannung

### KATZE

#### Wirbelsäule und Rückenmuskulatur

DLSS – degenerative  
lumbosakrale Stenose,  
Spondylose/Spondylarthrose

#### Muskelverspannungen

Myofasziale Schmerzen

#### Lebensqualität

Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und der Entspannung

**Zum Einsatz am Menschen  
jetzt hier mehr entdecken:**  
novafon.de - oder in der App!

Unsere Therapeuten beraten Sie persönlich, damit Sie optimal behandeln

Unser Ziel sind entspannte, motivierte und gesunde Tiere. Daher unterstützen wir alle NOVAFON Anwender mit verschiedenen Services:



#### Anwendungsbuch & App

Zu jedem NOVAFON gibt es über 100 Seiten Grundlagenwissen zum Downloaden – im Anwendungsbuch für Pferde, Hunde und Katzen. Die Muskelbilder, Anleitungen und verschiedenen Anwendungsgebiete unterstützen die Therapie. Ebenso finden Sie in der NOVAFON App unseren Behandlungsguide - praktisch und schnell.

Hier Anwendungsbuch laden:  
[novafon.de/service/downloads](http://novafon.de/service/downloads)

Hier App laden:  
[novafon.de/app](http://novafon.de/app)



#### Anwendungsberatung

Individuelle Krankheitsbilder, Bedürfnisse oder Fragen: Die telefonische Anwendungsberatung mit einem unserer Therapeuten ist jederzeit kostenlos buchbar.



#### Web-Seminare

Auch unsere Web-Seminare sind kostenlos. Therapeuten führen mehrmals im Jahr intensiv durch verschiedene Themen und erläutert auch die Grundfunktionen und Wirkweise des NOVAFON für Tier und Mensch.



#### Fortbildungen

Für Therapeuten oder Ärzte bieten wir zusätzlich Fortbildungen an. Diese sind umfangreicher als die Web-Seminare, lassen einen intensiven Austausch zu und werden von unseren NOVAFON Therapeuten durchgeführt.

Seit mehr als 90 Jahren stellt die NOVAFON – ELEKTROMEDIZINISCHE GERÄTE GMBH elektromedizinische Geräte her. Mit der Marke NOVAFON sind wir Botschafter der Lokalen Vibrationstherapie und stehen für Qualität und Verlässlichkeit in diesem Bereich. Unsere bewährten Therapiegeräte sind „Made in Germany“. Als Medizinproduktehersteller ist unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und unsere Produkte unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen – für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden.



#### Zertifiziertes Medizinprodukt

NOVAFON ist vom TÜV SÜD als Medizinproduktehersteller zertifiziert. Die Vibrationstherapie ist auf ihre Wirksamkeit untersucht und die Ergebnisse daraus wurden in zahlreichen Studien veröffentlicht.



#### Made in Germany

Unser Qualitätsversprechen: höchste Ansprüche an Verarbeitung und Material. Langlebige und zuverlässige Funktion. Eine lückenlose Qualitätssicherung.



#### 30-TAGE-GELD ZURÜCK

Wir bieten eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie auf unsere Produkte. Damit lässt sich die Therapie ausgiebig und ohne Risiko testen.

Gefördert durch:



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Energie

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages



 Produkte  
[novafon.de/produkte](https://novafon.de/produkte)

Web-Seminare  
[novafon.de/web-seminare](https://novafon.de/web-seminare)

NOVAFON –  
Elektromedizinische Geräte GmbH  
Daimlerstr. 13  
71384 Weinstadt

[info@novafon.de](mailto:info@novafon.de) | +49 7151 133970  
[www.novafon.com](https://www.novafon.com)



[novafon\\_vet](#)